

INK HUNTER EASY+

Equipo para la eliminación de tatuajes y micropigmentación

LONGITUD DE ONDA 1064 nm & 532 nm
HASTA 6 PULSOS/ SEGUNDO
LONGITUD PULSO DE 5-8ns
PANTALLA TÁCTIL A COLOR 5,6"
GUÍA LASER
1 AÑO GARANTÍA
CERTIFICACIÓN EUROPEA



**Pioneros en la eliminación de tatuajes
15 años liderando en tecnología**

Ink Hunter Easy+

El modelo Ink Hunter Easy+ es un láser cosmético de Nd:YAG Q-Switched con una longitud de onda de 1064nm ideal para la eliminación de tinta negra en la piel. Además cuentan con un filtro KTP para afectar a un rango más extenso de colores, pudiendo eliminar hasta colores rojos, azules y marrones, dependiendo de su grado de intensidad.

Tratamientos extra

Realiza los tratamientos estéticos más avanzados como el peeling con carbón activo, reducción de poros, manchas solares y tratamientos anti-aging.

Elimina la micropigmentación fallida

Resolver micropigmentaciones fallidas ya no es un problema. Repara o elimina migraciones del lagrimal, EyeLiners, Cejas y labios mal perfilados, con excelentes resultados.

Formación incluida y asesoría médica

Desde hace más de una década en Laserlight, nos tomamos muy en serio la manipulación de un equipo láser. Por ello todos nuestros equipos incluyen un curso de manipulación realizado por un Dr. especialista ofreciendo un diploma de capacitación, prácticas y exámen.

Fototerapia

Después de cada sesión aplica el tratamiento de fototerapia y mejorar la estimulación del colágeno y elastina de la piel tratada, logrando un efecto anti inflamatorio y regenerante.

Garantía y servicio técnico

Este equipo incluye una garantía completa de 1 año en funcionamiento y garantizamos un servicio técnico rápido, ágil y capaz a la altura de nuestra reputación.

¿Cómo funciona este tipo de laser?

La energía del láser se focaliza en los puntos de la piel donde haya tinta y después de haber elegido una potencia y filtros adecuados se proyecta en la piel. Los pigmentos absorben la energía y estallan rompiendo la cápsula donde se encuentran alojados. Los restos de pigmentos que hayan vuelto a quedar libres en el cuerpo serán eliminados por el sistema linfático.

Pasado un tiempo prudencial (mínimo 2 meses) repetiremos la operación con algo más de potencia. Harán falta de 3 a 12 sesiones para eliminar completamente el pigmento dependiendo del modelo utilizado (Easy+ o Master) aunque con 2 sesiones podremos dejar la piel preparada para volver a tatuar encima (cover up). Insistimos en que el número de sesiones variará según cada caso y el modelo utilizado, por lo que no se puede garantizar un resultado por número de sesiones.

¿Deja señales? ¿Quema?

Este tipo de laser es foto acústico y no térmico. El principio básico se basa en que el láser cosmético Ink Hunter, emite un haz de luz a una gran velocidad, con lo que no hay tiempo a que la piel absorba suficiente energía para quemarse. Por ejemplo es como si pasáramos la llama de un mechero por debajo de la mano rápidamente, en caso de hacerlo más lentamente nos quemaríamos.

¿Importa hacer una sesión de fototerapia a posteriori?

Los resultados hablan por si solos, la regeneración observada durante los primeros días por clientes que han recibido una sesión de fototerapia es mucho más rápida que los que no. Por lo que recomendamos su uso encarecidamente, incluso para aplicarla después de cualquier trabajo que haya podido dañar la piel como un tatuaje o micro pigmentación.


¿Como gestiono las citas?

Ahora Laserlight ofrece un programa de gestión de citas, con el que permite registrar a los clientes, subir las fotos con el resultado de cada sesión, programar de nuevas con un simple clic y emitir las hojas de consentimiento informado obligatorias para cada sesión.

¿Es importante la energía que tenga el láser?

Sí, sobretodo para eliminaciones completas. A partir de segundas o terceras sesiones es cuando el pigmento está un poco más debilitado y la energía que puede absorber no es tan alta. El modelo Easy+ es el más adecuado para realizar pequeñas eliminaciones y/o cover ups. Este equipo está indicado para iniciarse en el mundo de las eliminaciones y generar una base de clientes.

Antes y después

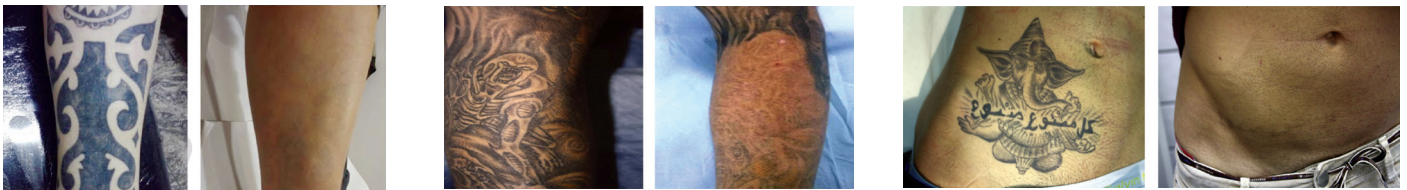

Accesorios IHE+



Lámpara de fototerapia (opcional)



Pedal con protector



Ópticas Ink Hunter Easy+

Especificaciones Ink Hunter Easy+

Equipo	Nd:YAG Q-switch con filtro KTP
Longitud del pulso	5-8ns
Longitud de onda	1064nm & 532nm
Frecuencia de pulsación	Hasta 6 pulsos/segundo
Energía	100-750mj
Diámetro de tiro	1-5 mm
Pantalla	5,6" pantalla a todo color táctil.
Guía láser	Si
Lámpara Led	Opcional
Curso	Incluido (en nuestras instalaciones)
Software de gestión	Incluido
Publicidad en la web	Incluido
Tratamientos	Eliminación de tatuajes, micropigmentación y foto rejuvenecimiento.
Garantía	1 año
Peso Neto	17 kg
Dimensiones	38x32x36 cm

© 2019 Laserlight. Reservados todos los derechos. Ink Hunter Master®, Ink Hunter Easy+® y Ink Hunter Master Pro®, son marcas comerciales de Laserlight en España, Europa y otros países.



INK HUNTER
EASY+



www.laserlight.es